



光波导出导入美容仪

使用说明书

注意事项:

使用本产品之前, 请仔细阅读本使用说明书, 并妥善保管以备日後参考。

警告

- 以下情况及部位请勿使用本产品: 孕婦及兒童; 佩戴電子醫療設備者; 過敏性體質; 皮膚疾病; 脫毛部位、整形部位; 眼瞼、咽喉部位; 產品充電時; 帶妝時。
- 使用時如有不適, 請立即停止使用并及時諮詢醫生。
- 請勿放置于潮濕或高溫的地方。
- 請勿擅自修理、拆卸或改造本產品。

產品規格:

- 名稱: 光波导出导入美容儀
- 型號: AP-002
- 額定電壓/功率: 3.7V--- / 1W
- 電池類型: Li-ion 500mAh
- 產品尺寸: 160.3mm x 43mm x 40.2mm
- 材質: ABS、不銹鋼

產品描述 (圖 1):

- 黃金光源
- 按摩頭
- 化妝棉固定環
- 銀色觸邊
- 負電極導入指示燈
- 正電極導出指示燈
- 黃光指示燈/充電指示燈
- 黃光鍵
- 負電極導入鍵
- 正電極導出鍵
- 充電孔
- USB線

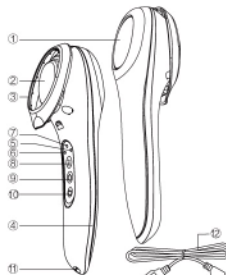


圖 1

操作方法:

※產品充電約3小時, 可連續工作2小時。

按鍵使用說明:

“X” 黃光鍵

按1下: 開機, 進入黃光護理模式, 指示燈⑦呈紅色常亮。

按2下: 進入黃光間歇護理模式, 指示燈⑦閃爍。

按3下: 關機。

“O” 負電極導入鍵

按1下: 開機, 進入負電極導入模式, 指示燈⑤呈藍色常亮。

按2下: 進入間歇導入模式, 指示燈⑤閃爍。

按3下: 關機。

“O” 正電極導出鍵

按1下: 開機, 進入正電極導出模式, 指示燈⑥呈綠色常亮。

按2下: 進入間歇導出模式, 指示燈⑥閃爍。

按3下: 關機。

正電極導出時間5分鐘後自動關機。
負電極導入時間5分鐘後自動關機。
黃光護理時間10分鐘後自動關機。

※初次使用或敏感肌膚者建議採用間歇護理模式; 每個模式設有定時功能, 到達定時時間自動關機或短按對應功能鍵關機

使用方法:

- 卸妝潔膚後, 在正電極導出模式下, 請翻開化妝棉固定環, 將化妝棉固定于按摩頭上, 並將適量的爽膚水塗于面部。手握產品兩側的銀色觸條, 將按摩頭緊貼面部, 由內向外輕輕打圈。(圖2)



圖 2

- 導出完成後, 取下化妝棉, 用溫水清潔面部殘留的污垢和潔膚產品, 切換到負電極導入模式。
- 請將適量的乳液/精華液塗在面部。手握產品兩側的銀色觸邊, 將按摩頭緊貼面部, 由內向外輕輕打圈, 促進護膚品吸收。(圖3)



圖 3

- 導入完成後, 切換到黃光護理模式, 將產品置于距離肌膚2~3cm處移動, 均勻照射肌膚表層。(圖4)



圖 4

注意: 每種模式使用時間按個人需要。

清潔和保養:

- 每次使用完畢後, 及時清潔按摩頭和機身, 清潔時請關閉產品電源。
- 請勿直接用水或使用酒精、鋼絲球、研磨性清潔劑、腐蝕性液體清潔產品, 否則可能損壞產品或引起龜裂或褪色。

故障排除:

癥狀	可能原因	處理方法
產品無法正常工作	電量不足	請為產品充電
	電量耗盡	
	其他故障	請向當地經銷商諮詢